



# Signo G40



**操作台—整合所有治療椅操控及器械管理  
可使各項診療內容之動作更為流暢**



**控制面板**

各項設定模式，可由液晶面板確認。

- 高速手機及微型馬達的燈光亮度：H · L · OFF  
注水：ON · OFF
- 微型馬達的旋轉範圍  
H · M · L / 正逆旋轉
- 洗牙機的牙周治療，牙髓治療，清除牙結石  
各模式的切換(SUPRASSON II 使用時)
- 倒數計時顯示：以10秒間隔，可設定到59分50秒



在自然的動作上可輕鬆提取的醫師操作台，有6組器械掛架設計。

考慮提取器械時的安全角度及配置。

**對應廣泛的治療位置且實現省空間化的Seat Mount Arm.**



**可動範圍 升降120mm**

Seat Mount Type為安裝於躺椅的操作台可上下移動120mm，可將操作台調整到更易於使用的位置。



**可平行移動的操作台**


操作台可對治療椅平行移動，更省空間。

**環繞患者的舒適感**



**皮革座椅**

環繞患者的座椅形狀，提供更佳安穩的包覆性。

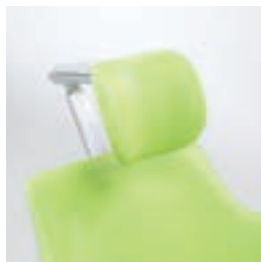

**頭靠**

自然地支撐頭部的設計，輕減患者的疲累感。



**醫師側外扶手(選配)**

扶手可簡易的上下移動，便於患者進入及移動。



**助理器械架**

可移動範圍更大，操作性更優。



**強化玻璃透明痰盂**



**可拆卸的透明痰盂**



※有雙折式及三折式躺椅可供選擇