

PENTRON



## FibreKleer® 4X™


### 高強度透明玻璃纖維根柱

- 高強度—可承受 401.5 牛頓強力。
- 透明度—利於 Bonding、樹脂黏劑固化、美觀自然。
- 易使用、易收納—不同尺寸規格、一目了然。
- 具備牙根之物理特性，可減少牙根斷裂。

FibreKleer4X 具有高達400%四倍鋁的優越放射阻透性，有助於進行放置及術後追蹤時，在X光片中他們立即能被辨識出來；捆束於透明樹脂基質中的半透明玻璃纖維提供卓越的彎曲強度，也保持全陶瓷修復體所期望要求的自然逼真之美觀效果。

具牙本質般抗彎曲係數的FibreKleer4X能相應使牙齒具彈性，且更均勻地沿著剩存的牙根結構傳導應力，相對於金屬根柱的實例，大幅減低根部斷裂的風險。

新套件包裝配有鑽頭固定架，可牢固地保存位置和鑽頭尺寸，且易於取用；彩色辨識與同尺寸鑽頭對應。三種柱身樣式設計：冠部強化平行狀 Parallel，錐形 Taper 及原型鋸齒狀，提供臨床醫生選擇最適合病患的尺寸和樣式。

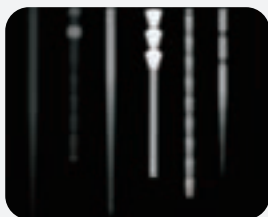

高達400%放射阻透性  
(4倍於鋁製根柱)，在  
X光片中可清楚辨識！



絕佳冠心固持力、確  
保假牙固位。



多種尺寸和設計樣式、符合各種牙齒型態。