

MONITEX

WhitenMAX BR800

雙波長專業牙科冷光美白機

採用最新的LED冷光技術，結合4顆藍光(波長450~470nm/cm²)和1顆紅光(波長620~630nm/cm²)兩種波長LED燈光源，可發出廣譜光源加速美白效應。

依照不同患者條件要求及美白藥劑對光源需求參數，本機設計有三種光源選擇，及兩種光度設定以進行最適當的美白程序。

WhitenMAX結合高功率LED，能進行對絕大多數的美白凝膠促化全面聚合、光激發和顏色校正技術，提供安全、快速、簡單易操作的高階牙科專業冷光美白治療。



美白前



美白後


兩種光照模式：

Mode 1：高功率
100% 光度輸出

Mode 2：低功率
70% 光度輸出

可選擇的光照時間：

於1~20分鐘間，以一分鐘的間隔，進行調整增長或縮短光照時間。

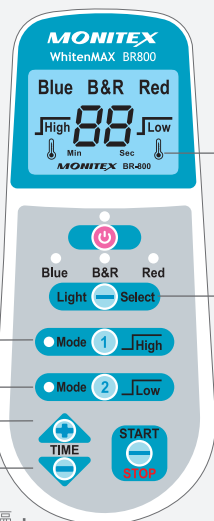

過熱指示顯示：

當LED模組溫度到達40°C，自動啟動散熱風扇，並在顯示幕上出現此符號。

三種可選擇的LED光源：

- > 冷光：藍色LED
- > 快速：藍色+紅色LED
- > 溫感：紅色LED

